

Individuella tillbehör – harmonisk, modern design



Lampa



Handtag



Infusionsstativ



Skyddshölje



Konsolbord



Pappersrullehållare



USB port

Teknisk data

Mått

Total bredd, inkl. armstöd	90 cm
Sittbredd	58 cm
Total längd	203 – 230 cm
Armstöd	52 x 15,5 cm
Totalvikt	94 kg

Justeringsmöjligheter

Ryggstödet vinkel	75° – 0°
Sätessektionens vinkel	30° – 5°
Bensektionsvinkel	5° – 30°
Fotstöd (manuell)	28 cm
Höjdjustering	54 – 80 cm

Electrical characteristics

Nätspänning	100 – 240 Volt 50/60 Hz
Skyddsklass	II
Typ av skydd	IPX 4
Motorer	4
Nominellt driftspänningsbatteri (tillval)	25,2 Volt
Batterikapacitet (tillval)	1800 mAh

Säkerhet

Säker arbetsbelastning	240 kg
------------------------	--------

Den illustrerade terapistolen har valfria tillbehör, som inte ingår i standardversionen. Standardfärgen är monokrom kromgrå.

Modern komfort för dina patienter



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

Technische Änderungen vorbehalten
B-MOBUL2E/01 08/2019



Den nya UniversalLine2 – alla viktiga funktioner med hög standard på utrustning och design



Förprogrammerad sittplats för in- och urstigning



Snabb justering av armstöd



Optimal, individuell avkoppling genom individuellt justerbara segment



Snabb chockposition i nödsituationer

Den nya UniversalLine2 är perfekt för poliklinisk vård av dina patienter.

Den moderna designen, material av hög kvalitet och det mycket noggranna utförandet understryker den höga standarden på denna bekväma terapistol. Utöver detta finns det flexibla applikationsmöjligheter, som gör att stolen passar nästan alla patienter.

UniversalLine2 har designats med alla funktioner i åtanke, som krävs i praktiken, med särskild hänsyn till prisvärdhet & prestanda.

Terapistolen kan anpassas helt till inredningen på din avdelning, då den finns i många olika färger och i en modern 2-färgsdesign.

Förutom färgproverna till höger finns den tillgänglig i andra färger. Kontakta oss på support@meditechnordic.se för en färgkarta.



Armstödet vrids intuitivt och enkelt åt sidan med hjälp av en spak och kan sänkas framåt för optimal positionering.



Den bekväma kudden kan justeras individuellt i höjd med en stjärnskruv.



Den upplysta fjärrkontrollen har en tydlig design, vilket gör det enkelt när man ska justera de individuella segmenten.



Den stora röda fotbrytaren gör det lätt att använda chockläget från båda sidor. Vårdpersonalens händer förblir fria för patienten.



Atoll



Royal



Orchid



Cyclame




Cherry



Carneol



Mint

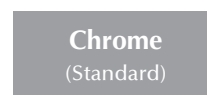

Chrome
(Standard)



De fyra motorerna är placerade direkt under det avtagbara sätet för enkel service.



Det manuellt justerbara fotstödet ger både små och stora patienter en känsla av säkerhet under behandlingen.



Ekvipotentiell bindning enligt EN 60601 ökar säkerheten för dina patienter.